



细胞和组织培养

细胞培养、冷冻保存、过滤、液体处理

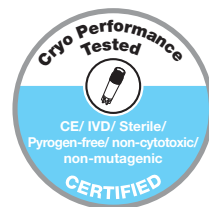

Come Grow with us

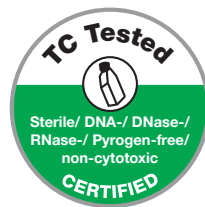

SARSTEDT



早在 25 年以前，SARSTEDT 公司就开始生产高品质细胞培养产品，并售往全球。多年的经验以及对于用户需求的深刻了解，促使我们不断优化和扩展产品种类。本目录将向您详细介绍我们的细胞和组织培养系列产品。

您的SARSTEDT团队

目录



SARSTEDT 细胞和组织培养质量认证标志

TC认证 • Cryo认证

培养表面

细胞培养瓶

SARSTEDT 细胞培养瓶产品特点

Quick-Release 盖子

订购信息

细胞培养皿

SARSTEDT 细胞培养皿产品特点

订购信息

细胞刮刀

细胞培养板

SARSTEDT 细胞培养板产品特点

订购信息

TC 细胞培养嵌套

SARSTEDT TC细胞培养嵌套产品特点

订购信息

适用于显微镜观察的盖玻片

lumox® • 基于薄膜的细胞培养系统

lumox®产品优势

lumox®培养皿 • 透气的细胞培养皿

lumox® 多孔板 • 自发荧光低的多孔板

x-well 多孔细胞培养板

flexiPERM®

quadriPERM®

miniPERM® • 生物反应器

miniPERM® 生物反应器产品优势

miniPERM® 生产模块 • 生物反应器和配件

订购信息 • 通用旋转装置 • 配件

CryoPure 冻存产品

CryoPure 冻存产品特点

CryoRack 40

订购信息

冻存盒

过滤产品

细胞筛

Filtropur V • Filtropur BT

Filtropur S • Filtropur S plus • Filtropur L

血清移液管

血清移液管 • 移液管

Automatic-Sarpette® • M-Sarpette®

细胞培养管、离心管、储存和运输管

第 4 - 5 页

第 4 页

第 5 页

第 6 - 8 页

第 7 页

第 8 页

第 8 页

第 9 - 10 页

第 9 页

第 10 页

第 11 页

第 12 - 13 页

第 12 页

第 13 页

第 14 - 16 页

第 15 页

第 16 页

第 17 页

第 18 - 20 页

第 19 页

第 20 页

第 20 页

第 21 页

第 22 页

第 23 页

第 24 - 27 页

第 25 页

第 26 页

第 27 页

第 28 - 32 页

第 29 页

第 30 页

第 31 页

第 32 页

第 33 - 35 页

第 33 页

第 34 页

第 35 页

第 36 - 38 页


第 37 页

第 38 页

第 39 页

与我们共同成长——细胞和组织培养技术不仅广泛应用于基础科学研究，而且越来越多地用于生物技术开发以及临床和药物研究等。生物毒性测试、生化反应质量控制以及工业生产（例如单克隆抗体制造）等领域都对相应细胞培养产品提出越来越高的纯度和质量要求。而确保实验可比较性与可再现性的基本前提是严格遵守质量标准。

为了满足客户需求，25 年来 SARSTEDT 致力于生产和提供多种多样细胞和组织培养耗材，并且所有耗材产品都获得严格认证。

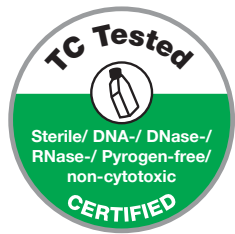

TC 认证


自 1990 年以来，SARSTEDT 就开始为客户提供高品质细胞培养耗材。我们所有的细胞培养产品均在洁净车间经自动化产线生产制造，所有操作人员都经严格培训，穿戴完整防护服后方可进入生产区域。

我们的基本原则是凡是与细胞接触的产品，不得对细胞造成任何干扰影响。SARSTEDT 细胞培养耗材坚持这一原则，所有产品均在严格洁净生产环境中制造，并且标有“经 TC 测试 (TC Tested)”质量标志。

细胞培养产品满足以下要求：

- ✓ 无菌
- ✓ 无热原/无内毒素
- ✓ 无细胞毒性
- ✓ 无 DNA
- ✓ 无 DNase/RNase

- 我们保证遵守以下合规要求：
- 无菌水平符合 ISO 11137 标准要求
 - 热原/内毒素水平 < 0.06 EU/ml
 - 无细胞毒性，符合 ISO 10993 标准要求
 - 人源 DNA < 0.5 pg/μl
 - 细菌 DNA < 0.02 pg/μl
 - DNase < 7.1x10⁻⁵ U/μl
 - RNase < 1.4x10⁻¹⁰ U/μl

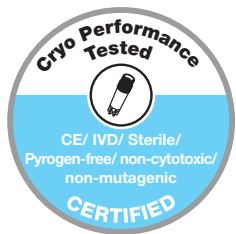

Cryo 认证

在 CryoPure 冻存管中进行“活性”保存时，不得让细胞和组织样品暴露在干扰性物质污染的危险之中。因此，SARSTEDT CryoPure 冻存管会进行多项的测试，并在通过相关测试之后提供以下参数声明：


- ✓ 无菌
- ✓ 无热原/无内毒素
- ✓ 无细胞毒性
- ✓ 无致变物
- ✓ CE IVD

- 我们保证遵守以下合规要求：
- 无菌水平符合 ISO 11137 标准要求
 - 热原/内毒素水平 < 0.06 EU/ml
 - 无细胞毒性，符合 ISO 10993 标准要求
 - 无致突变因素，符合 Ames Test II 要求

细胞体外培养成功的基本前提是最大程度模拟细胞体内生长的环境。培养皿的表面特质尤为重要，因为多数类型的细胞只有在成功贴附之后，方能存活、生长和繁殖。为了尽可能满足各种不同细胞类型的要求，SARSTEDT 提供了三种不同培养表面的培养瓶、培养皿和培养板。为了在从包装中取出之后也能明确识别器皿，我们使用颜色对产品进行了标记：


适用于贴壁细胞的
SARSTEDT 标准表面

通过对聚苯乙烯表面进行特殊处理，将亲水基团引入到表面中，促进细胞表面蛋白质结合与培养表面结合，进而帮助细胞粘附。红色标记的、亲水性标准表面为大多数贴壁细胞提供了最佳的培养支持。

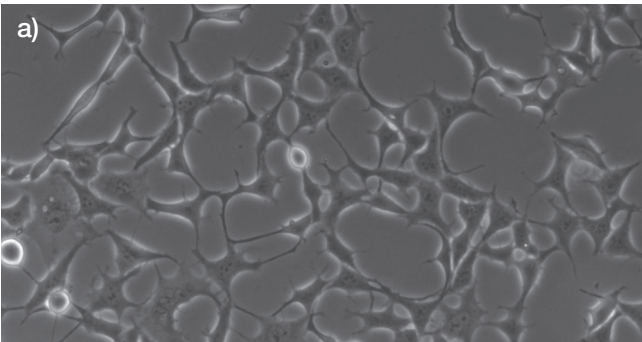


适用于高贴壁要求的
SARSTEDT Cell+ 表面

原代细胞、敏感细胞系以及在减血清或无血清条件下培养的细胞，往往需要粘附性更强的培养表面。黄色标记的 SARSTEDT Cell+ 生长表面是专门为这些应用研发而成的。通过对塑料表面进行特殊处理，将额外的极性基团引入到亲水表面中，使细胞生长环境更类似于体内环境，进而促进敏感细胞的粘附。Cell+ 表面的这一特性，在许多实际应用中相当于生物材质包被表面的使用效果。

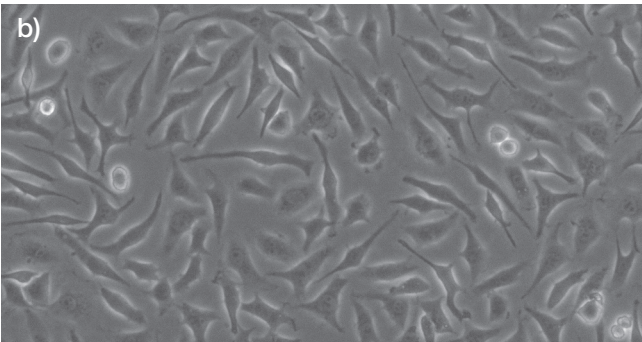

SARSTEDT
悬浮培养表面

对于悬浮细胞（例如淋巴细胞、杂交瘤细胞等），推荐选用绿色标志的疏水表面。疏水性表面在替代培养的过程中通过降低微粘附，最大限度地减少细胞损失。

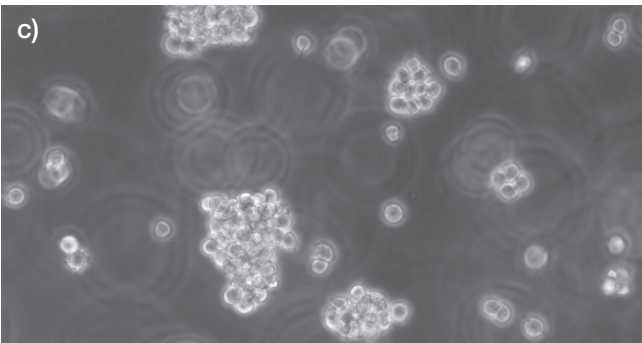

100 μm

在 SARSTEDT 生长表面上培养不同的细胞类型，可以明显分辨不同细胞类型的生长活性*。a) 在标准 TC 表面上培养 HEK293 细胞 48 小时。b) 血清减少条件下 (1%) 在 Cell+ 表面上培养 CHO 细胞 24 小时。c) 在悬浮表面上培养 Jurkat 细胞 72 小时。图中比例尺为 100 μm。

* “细胞培养表面参考手册”（资料货号：20.783）详细列明了在各种生长表面上已成功培养的细胞类型。



SARSTEDT 提供 25 cm²、75 cm² 和 175 cm² 三种培养面积的细胞培养瓶。我们的细胞培养瓶均由高度通透优质聚苯乙烯制造，适合显微观察。所有细胞培养瓶均经过严格检测和相关认证，带有“TC 认证”质量标记（参见第 4 页）。

SARSTEDT 细胞培养瓶产品特点

培养瓶外部形状具备以下特征：

- 血清移液管和细胞刮刀可以触及任意角落。①
- 在瓶颈两侧提供醒目书写区，一侧上印有白色刻度，另一侧上刻有刻度，使用方便。②
- 瓶体防侧翻设计，降低了污染危险。另外，堆垛边缘确保了重叠放置时的稳定性。
- 优化倾斜瓶颈和防滴流边缘，减少培养基溢出造成污染的危险，且倾倒更安全。③
- 每个培养瓶上均标注批号和有效期，即便从包装袋取用之后，也可查询和追溯。④

红色 = 贴壁细胞
黄色 = 敏感贴壁细胞
绿色 = 悬浮细胞






Quick-Release 盖采用使用者友好设计，无论关闭或者打开，都只需转动 1/3 圈。当实验者同时处理多个细胞培养瓶时，可以快速便捷开盖。为防止 Quick-Release 盖误关，我们在螺纹中增加了一个“阻挡卡条”。在关闭时，可以感受到“阻挡卡条”所产生的较小阻力。

有两种带齿纹 Quick-Release 盖产品可选：

- **过滤盖**配有 0.2 µm 孔径滤膜，确保持续的无菌气体交换。滤膜疏水，降低污染危险。
- **双位螺旋盖**（= 无滤膜盖）旋至闭合位置时，瓶体密封；旋至通风位置时，气体均匀交换，细胞正常生长（箭头呈上下指示）。当瓶盖旋至正确位置时，会发出清晰的“咔哒”声，提示操作者旋转到位，在使用过程中不会脱落。同时，瓶盖上的齿纹和箭头也有助于判断瓶盖位置。在培养箱中，不必对堆叠的培养瓶反复手动检查，确定瓶盖是否盖好。

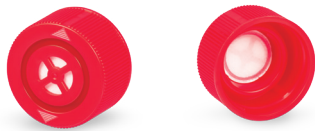

Quick-Release 盖处于打开状态



Quick-Release 盖处于透气状态



Quick-Release 盖处于密封状态



细胞培养瓶包装在一个可重复闭合的迷你拉链袋中，在首次打开前，包装袋由一个原装锁扣封住。

订购信息

订购编号	颜色代码*	生长面积 [cm²]	盖子类型	建议工作体积 [ml]	最大容积 [ml]	包装规格 个每包/个每箱
83.3910		25	双位螺旋盖	7	12.5	10/300
83.3910.002		25	过滤盖	7	12.5	10/300
83.3911		75	双位螺旋盖	21	55	5/100
83.3911.002		75	过滤盖	21	55	5/100
83.3912		175	双位螺旋盖	50	125	5/40
83.3912.002		175	过滤盖	50	125	5/40
83.3910.300		25	双位螺旋盖	7	12.5	10/300
83.3910.302		25	过滤盖	7	12.5	10/300
83.3911.300		75	双位螺旋盖	21	55	5/100
83.3911.302		75	过滤盖	21	55	5/100
83.3912.300		175	双位螺旋盖	50	125	5/40
83.3912.302		175	过滤盖	50	125	5/40
83.3910.500		25	双位螺旋盖	7	12.5	10/300
83.3910.502		25	过滤盖	7	12.5	10/300
83.3911.500		75	双位螺旋盖	21	55	5/100
83.3911.502		75	过滤盖	21	55	5/100
83.3912.500		175	双位螺旋盖	50	125	5/40
83.3912.502		175	过滤盖	50	125	5/40

配件

订购编号	颜色代码*	盖子类型	规格	包装规格，个每包/个每箱
83.3990.025		双位螺旋盖	适用于 T 25	25/100 • 独立包装，无菌
83.3990.075		双位螺旋盖	适用于 T 75	25/100 • 独立包装，无菌
83.3990.175		双位螺旋盖	适用于 T 175	25/100 • 独立包装，无菌

* 红色 = 贴壁细胞 黄色 = 敏感贴壁细胞 绿色 = 悬浮细胞





SARSTEDT 提供 35 mm、60 mm、100 mm 和 150 mm 四种尺寸规格的培养皿。所有培养皿均经过严格检测和认证，带有“TC 认证”质量标记（参见第 4 页）。我们的培养皿由高度通透优质聚苯乙烯制造，适合肉眼和显微观察。

SARSTEDT 新一代细胞培养皿产品特点

新细胞培养皿具备以下突出特点：

- 全新**SUREGrip**边缘设计，培养皿侧面圆环凸出，表面粗糙，方便使用者平稳拿取整个培养皿，**1**或者将一个培养皿从堆叠的多个培养皿中取出。
- 自动平稳地取出培养皿，减小污染危险。**2**
- 盖子和培养皿上明显可见的箭头标志，帮助两部分正确定位。
- 盖子中的小凸起，既保证了培养皿内持续的气体交换，又确保了闭合安全。
- 盖子和底部中突出的堆垛环，辅助多个培养皿稳定堆垛。
- 针对克隆实验应用，SARSTEDT 专门提供35 mm 和 60 mm 两种尺寸规格的带网格培养皿。**3**
- 为了取出之后也能很好地进行追溯，每个培养皿上都标记了颜色代码以及相应的批号和保质期。**4**
- 我们提供的所有大小规格细胞培养皿，均有三种不同的生长表面：
红色 = 贴壁细胞
黄色 = 敏感贴壁细胞
绿色 = 悬浮细胞

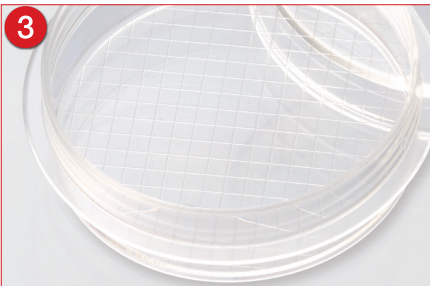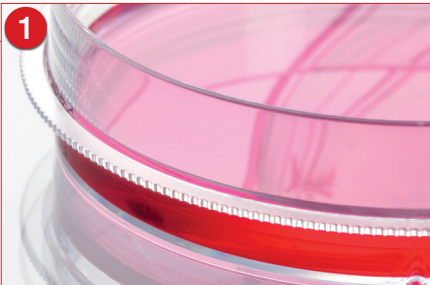



细胞培养皿使用可重复闭合的迷你拉链袋包装，在首次打开前，包装袋由一个原装锁扣密封。

订购信息

订购编号	颜色代码*	Ø/高度 [mm]	生长面积 [cm²]	网格	建议工作体积 [ml]	包装规格 个每包/个每箱
83.3900		35/10	8	不含	3	10/500
83.3900.002		35/10	8	含	3	10/500
83.3901		60/15	21	不含	5	10/500
83.3901.002		60/15	21	含	5	10/500
83.3902		100/20	58	不含	13	10/300
83.3903		150/20	152	不含	36	5/100
83.3900.300		35/10	8	不含	3	10/500
83.3901.300		60/15	21	不含	5	10/500
83.3902.300		100/20	58	不含	13	10/300
83.3903.300		150/20	152	不含	36	5/100
83.3900.500		35/10	8	不含	3	10/500
83.3901.500		60/15	21	不含	5	10/500
83.3902.500		100/20	58	不含	13	10/300

* 红色 = 贴壁细胞
黄色 = 敏感贴壁细胞
绿色 = 悬浮细胞


用于简单、完整获取贴壁细胞

- 符合人体工程学的聚苯乙烯手柄，配有带凹槽的防滑把手
- 刮刀刀头采用柔软橡胶制成，刮取细胞时伤害更小
- 所有规格细胞刮刀，都可调整角度
- 三种尺寸可选：S、M 和 L 号
- 独立无菌包装，不含热原/内毒素，无细胞毒性



SARSTEDT 细胞刮刀与四款其他品牌细胞刮刀对比:

从图中可以看出，同样与胰蛋白酶消化法相比，SARSTEDT 细胞刮刀从单位体积（毫升）中分离得到的细胞量最高 (96%)。而竞争型产品（A、B、C 和 D）的细胞产出量介于 62% - 84% 之间。回收得到的细胞，在相同条件下培养比较细胞活性。实验结果表明，所有通过细胞刮刀所获得的细胞活性均在 95% 左右。

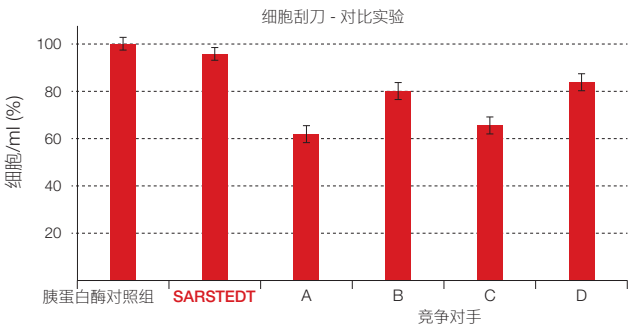

细胞刮刀订购信息

订购编号	描述	刀刃长度 [cm]	总长 [cm]	包装规格 个每包/个每箱	适用范围
83.3950	双位刮刀, S号	1.35	24.0	1/100	• 细胞培养瓶: T-25 • 细胞培养板: 24 孔、12 孔、6 孔 • 细胞培养皿 • 细胞培养管
83.3951	双位刮刀, M号	1.7	24.0	1/100	• 细胞培养瓶: T-75 • 细胞培养板: 12 孔、6 孔 • 细胞培养皿: 35x10/60x15/100x20/150x20
83.3952	双位刮刀, L号	1.7	36.0	1/100	• 细胞培养瓶: T-175 • 细胞培养板: 12 孔、6 孔 • 细胞培养皿: 35x10/60x15/100x20/150x20 • 转瓶



对于多孔平行培养，SARSTEDT 提供 6、12、24、48 和 96 孔不同规格的细胞培养板。所有培养板均由高度通透优质聚苯乙烯制造而成，不仅培养孔孔间高度一致，整板也高度平整。高透底部适合从下方进行显微测量。所有细胞培养板均经过严格检测和认证，带有“TC 测试”质量标记（参见第 4 页）。

SARSTEDT 细胞培养板产品特点

SARSTEDT 细胞培养板的外形尺寸严格遵循 ANSI/SLAS 标准 1-2004 要求，可用于符合这一标准的仪器操作和分析使用。其他产品特征如下：

- 为了取出之后也能进行产品追溯，每个培养板上都标记了颜色代码以及相应的批号和保质期。**1**
- 为了便于孔内加样，在凹槽边缘 **2** 上和培养孔间隙 **3** 中均标注有字母和数字。
- 独立式凹槽设计，减少移液污染危险。**2 & 3**
- 底座防滑栅格设计，有助于平稳取出整个培养板。通过透明的底座侧壁可以对孔内加样进行目测检查。**4**
- 盖子内侧通风栅和冷凝环设计，二者共同保证了稳定的气体交换，最大限度减少蒸发。
- 所有规格的细胞培养板，均提供三种不同生长表面供选择：

红色 = 贴壁细胞
黄色 = 敏感贴壁细胞
绿色 = 悬浮细胞



订购信息

订购编号	颜色代码*	孔数	底部形式	单孔生长面积 [cm²]	工作体积 [ml]	包装规格 个每包/个每箱
83.3920	红色	6	□	8.87	4	1/50
83.3920.005	红色	6	□	8.87	4	5/100
83.3921	红色	12	□	3.65	2	1/50
83.3921.005	红色	12	□	3.65	2	5/100
83.3922	红色	24	□	1.82	1	1/50
83.3922.005	红色	24	□	1.82	1	5/100
83.3923	红色	48	□	0.64	0.5	1/50
83.3923.005	红色	48	□	0.64	0.5	5/100
83.3924	红色	96	□	0.29	0.2	1/50
83.3924.005	红色	96	□	0.29	0.2	5/100
83.3925	红色	96	U	-	最大 0.31	1/50
83.3926	红色	96	V	-	最大 0.29	1/50
83.3920.300	黄色	6	□	8.87	4	1/50
83.3921.300	黄色	12	□	3.65	2	1/50
83.3922.300	黄色	24	□	1.82	1	1/50
83.3923.300	黄色	48	□	0.64	0.5	1/50
83.3924.300	黄色	96	□	0.29	0.2	1/50
83.3920.500	绿色	6	□	8.87	4	1/50
83.3921.500	绿色	12	□	3.65	2	1/50
83.3922.500	绿色	24	□	1.82	1	1/50
83.3923.500	绿色	48	□	0.64	0.5	1/50
83.3924.500	绿色	96	□	0.29	0.2	1/50
83.3925.500	绿色	96	U	-	最大 0.31	1/50
83.3926.500	绿色	96	V	-	最大 0.29	1/50

* 红色 = 贴壁细胞
黄色 = 敏感贴壁细胞
绿色 = 悬浮细胞






SARSTEDT TC (Tissue Culture) 细胞培养嵌套适用于 TC 板，使用方便。嵌套与培养板组合构成一个两室的细胞培养系统，可以更好地模拟细胞的体内情况。因此，TC 培养嵌套可用于细胞和组织培养领域众多复杂的实验：

- 转运、分泌和扩散研究
- 肿瘤细胞迁移实验
- 细胞毒性测试
- 共培养
- 跨上皮细胞电阻测量 (TEER)
- 原代细胞培养
- 3D 细胞培养
- 其他实验

SARSTEDT 悬挂式 TC 细胞培养嵌套的设计非常人性化，具有以下特点：

- 物理结构稳定，由高透聚苯乙烯 (PS) 材料制作而成。
- 不对称设计，便于孔内移液（图 1a）。
- 间隔挡板可防止液体在嵌套与培养孔之间上移。
- 上边缘较矮，有助于气体交换（见图 1b）。

图 1

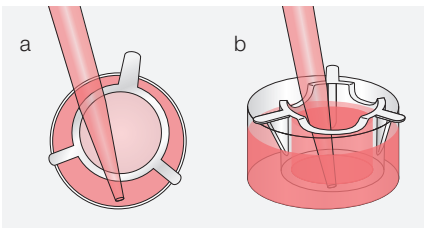


底膜特点

TC 细胞培养嵌套配有 PET（聚酯）底膜，有五种不同的孔径大小（0.4 μ m、1 μ m、3 μ m、5 μ m和8 μ m）和两种光学特性（透明和半透明）可选。我们的 PET 底膜优点：

- 超薄高质量 PET 膜，径迹蚀刻，孔径大小一致（图 2a）。
- 半透明膜（孔密度高）和透明膜（孔密度较低）均提供明确孔密度参数。
- 通过双侧TC处理，确保细胞贴附效果。
- PET 膜本身属性，将非特异性分子结合最小化。
- 高耐化学性，易于细胞固定和染色。
- 切割下的膜能够保持平坦，便于下一步处理和显微观察（图 2b）。

图 2

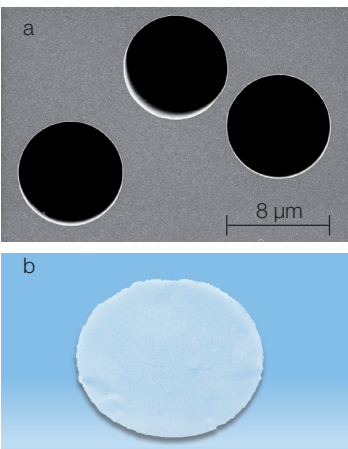

SARSTEDT TC 细胞培养嵌套应用领域：

- 膜孔径较小的嵌套（0.4 μ m，1 μ m）一般用于不希望细胞通过膜孔迁移的应用。例如共培养实验等，培养细胞可彼此靠近，但不会真正混合。
- 如果细胞需要通过膜孔，迁移到底部，则推荐使用较大膜孔径的嵌套。例如趋化实验、侵袭实验和迁移实验等，根据细胞类型，可分别使用膜孔径为 3 μ m、5 μ m 或 8 μ m 嵌套。
- 由于膜孔密度较高，孔径 0.4 μ m 的半透明膜嵌套可以确保极佳的基底外扩散，适合转运、分泌、扩散和细胞毒性研究。
- 半透明膜既适用于电子显微镜观察，也适用于 TEER（跨上皮细胞电阻）实验。
- 透明膜适用于光学和电子显微镜观察。


TC 细胞培养嵌套与相应尺寸 TC 细胞培养板良好兼容（参见第 12 页和 13 页）。
所有嵌套均为无热原/无内毒素、无细胞毒性，无菌，独立包装。

订购信息

订购编号	孔数	膜材料	孔径 [μm]	孔密度 [孔/cm²]	光学特性	膜厚度 [μm]	生长面积 [cm²]	工作体积 [ml]		包装规格 个每包/个每箱
								嵌套	孔	
83.3930.040	6 孔	PET	0.4	1 × 10 ⁸	半透明	12	4.5	1 - 4	2.4 - 4.8	1 / 24
83.3930.041		PET	0.4	2 × 10 ⁶	透明	12	4.5	1 - 4	2.4 - 4.8	1 / 24
83.3930.101		PET	1.0	2 × 10 ⁶	透明	11	4.5	1 - 4	2.4 - 4.8	1 / 24
83.3930.300		PET	3.0	2 × 10 ⁶	半透明	9	4.5	1 - 4	2.4 - 4.8	1 / 24
83.3930.500		PET	5.0	6 × 10 ⁵	半透明	10	4.5	1 - 4	2.4 - 4.8	1 / 24
83.3930.800		PET	8.0	2 × 10 ⁵	半透明	11	4.5	1 - 4	2.4 - 4.8	1 / 24
83.3931.040	12 孔	PET	0.4	1 × 10 ⁸	半透明	12	1.1	0.2 - 0.8	1.2 - 2.4	1 / 48
83.3931.041		PET	0.4	2 × 10 ⁶	透明	12	1.1	0.2 - 0.8	1.2 - 2.4	1 / 48
83.3931.101		PET	1.0	2 × 10 ⁶	透明	11	1.1	0.2 - 0.8	1.2 - 2.4	1 / 48
83.3931.300		PET	3.0	2 × 10 ⁶	半透明	9	1.1	0.2 - 0.8	1.2 - 2.4	1 / 48
83.3931.500		PET	5.0	6 × 10 ⁵	半透明	10	1.1	0.2 - 0.8	1.2 - 2.4	1 / 48
83.3931.800		PET	8.0	2 × 10 ⁵	半透明	11	1.1	0.2 - 0.8	1.2 - 2.4	1 / 48
83.3932.040	24 孔	PET	0.4	1 × 10 ⁸	半透明	12	0.3	0.1 - 0.4	0.8 - 1.6	1 / 48
83.3932.041		PET	0.4	2 × 10 ⁶	透明	12	0.3	0.1 - 0.4	0.8 - 1.6	1 / 48
83.3932.101		PET	1.0	2 × 10 ⁶	透明	11	0.3	0.1 - 0.4	0.8 - 1.6	1 / 48
83.3932.300		PET	3.0	2 × 10 ⁶	半透明	9	0.3	0.1 - 0.4	0.8 - 1.6	1 / 48
83.3932.500		PET	5.0	6 × 10 ⁵	半透明	10	0.3	0.1 - 0.4	0.8 - 1.6	1 / 48
83.3932.800		PET	8.0	2 × 10 ⁵	半透明	11	0.3	0.1 - 0.4	0.8 - 1.6	1 / 48

高透盖玻片/用于细胞培养的盖玻片

在小面积上进行贴壁细胞的无菌培养、固定、染色和显微观察等所有工作时，我们推荐您使用 SARSTEDT 盖玻片。我们的盖玻片采用经改良的塑料原料制造，两侧均经过表面处理且具有良好的光学特性。所有盖玻片均经过严格检测认证，无菌、无热原/无内毒素、无细胞毒性。

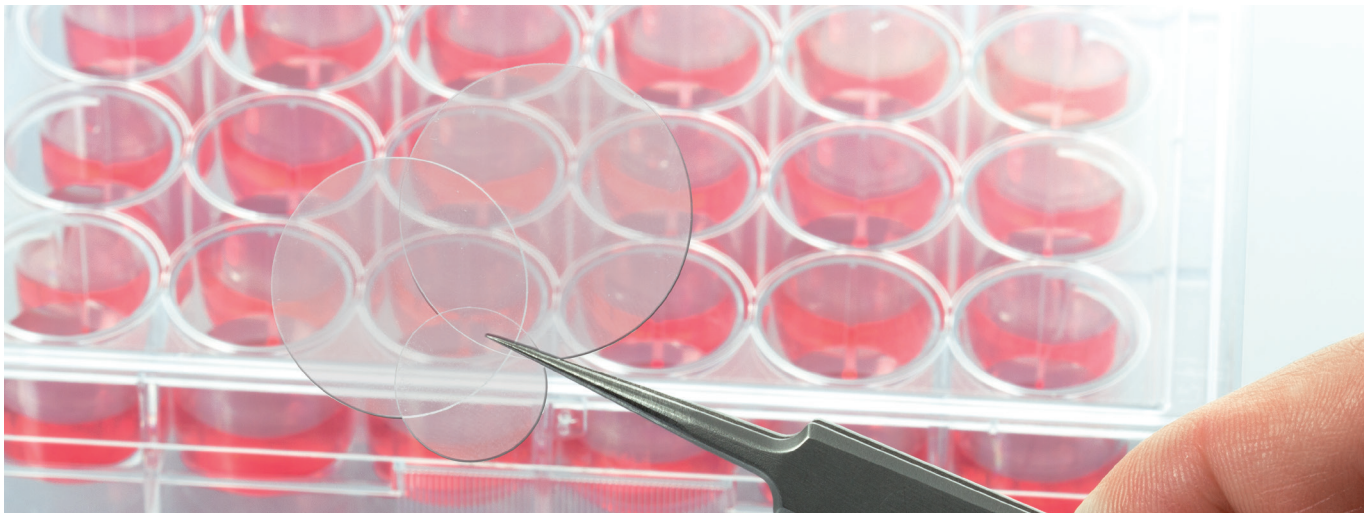

无菌盖玻片适用于多种器皿中细胞培养:

订购编号	描述	颜色代码	直径 [mm]	包装规格 个/箱	35 x 10 培养皿	6 孔细胞培养板	12 孔细胞培养板	24 孔细胞培养板
83.1840	盖玻片		25	200	✓	✓	✗	✗
83.1840.001	盖玻片		22	200	✓	✓	✗	✗
83.1840.002	盖玻片		13	200	✓	✓	✓	✓





lumox® 细胞培养产品的一大特点便是超薄且透气性良好的薄膜底部。由于透气性好且扩散路径短，因而气体交换效果极佳。lumox® 薄膜底部与传统的聚苯乙烯底部相比，自发荧光极低（图 1）；透光率相比聚苯乙烯或玻璃底板更高（图 2）。因而在成分测定、细胞成像和分析等应用中 lumox® 薄膜可以保持高灵敏度，且重复性极佳。lumox® 系列产品用途广泛，无论是一般的细胞培养，还是基于荧光的细胞测定自动分析等均适用。

图 1 330 nm 波长处，lumox® 薄膜和聚苯乙烯自发荧光比较



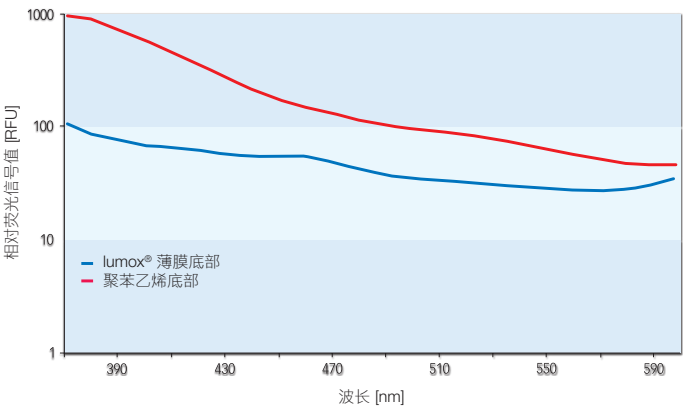


图 2 透光度比较，低信号光源，波长 200 - 300 nm 处差异尤为明显

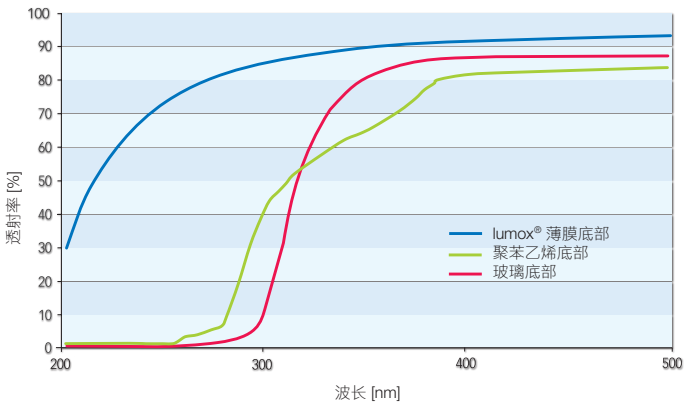

lumox® • 优势概述

- 自发荧光极低
- 高度透明
- 透气性佳
- 有利于细胞生长
- 显微分析理想之选

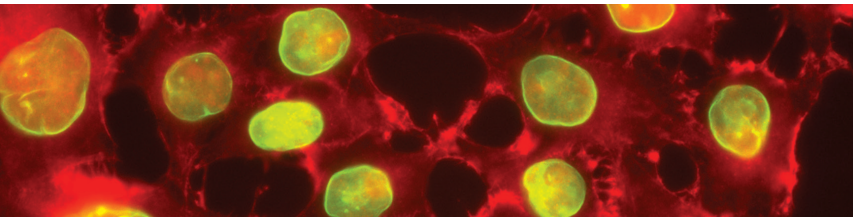

细胞生长更好

lumox® 产品采用薄膜底部，透气性好，具有诸多优势。细胞直接在气相和液相之间的边界处生长，培养基不再成为气体扩散屏障。扩散路径短，气体交换效果更佳。薄膜不仅直接为细胞供应氧气，也可以快速排出代谢产物，例如 CO₂。

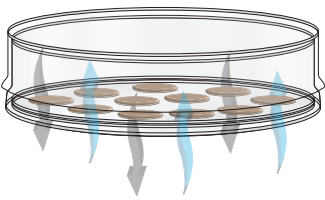


图 3 通过 lumox® 底部薄膜进行气体交换

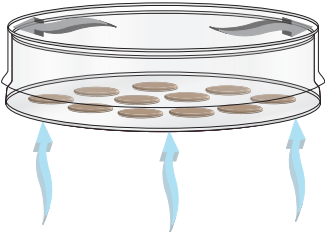


图 4 常规细胞培养容器，无法通过聚苯乙烯或玻璃底部进行气体交换

lumox® 细胞培养皿 • 透气的细胞培养皿



lumox® 培养皿由透明的聚苯乙烯盖和聚苯乙烯框架组成，底部是透气的 lumox® 薄膜 (25 µm)。lumox® 培养皿有直径 35 mm 和 50 mm 两种规格。培养区域有亲水和疏水两种可选，贴壁细胞和悬浮细胞均可使用 lumox® 培养皿进行培养。针对电子显微镜观察等应用，可以借助手术刀将薄膜切下。lumox® 培养皿均经过严格检测认证，无菌、无热原/无内毒素、无细胞毒性。

订购信息 – lumox® 培养皿

订购编号	描述	表面类型	直径/高度 [mm]	生长面积 [cm²]	工作体积 [ml]	包装规格 个每包/个每箱
94.6077.333	lumox® 培养皿 35	疏水	35/6	6.3	2.5	50/250
94.6077.331	lumox® 培养皿 35	亲水	35/6	6.3	2.5	50/250
94.6077.305	lumox® 培养皿 50	疏水	50/12	20.4	5-10	50/200
94.6077.410	lumox® 培养皿 50	亲水	50/12	20.4	5-10	50/200


lumox® 多孔细胞培养板 • 自发荧光低的多孔板

lumox® 多孔细胞培养板由黑色聚苯乙烯主体（标准尺寸）和透明的 lumox® 薄膜底部组成，薄膜超薄 (50 µm) 透气。有 24 孔、96 孔和 384 孔三种规格可选。所有规格多孔细胞培养板产品均经过严格检测认证，无菌、无热原/无内毒素，无细胞毒性。



订购信息 – lumox® 多孔细胞培养板


订购编号	描述	表面类型	单孔生长面积 [cm²]	单孔工作体积 [µl]	包装规格 个每包/个每箱
94.6000.014	lumox® 多孔细胞培养板，24 孔	疏水	1.90	500 - 1,500	4
94.6110.024	lumox® 多孔细胞培养板，24 孔	亲水	1.90	500 - 1,500	20
94.6000.024	lumox® 多孔细胞培养板，96 孔	疏水	0.34	25 - 340	4
94.6120.096	lumox® 多孔细胞培养板，96 孔	亲水	0.34	25 - 340	20
94.6000.034	lumox® 多孔细胞培养板，384 孔	疏水	0.11	10 - 130	4
94.6130.384	lumox® 多孔细胞培养板，384 孔	亲水	0.11	10 - 130	20

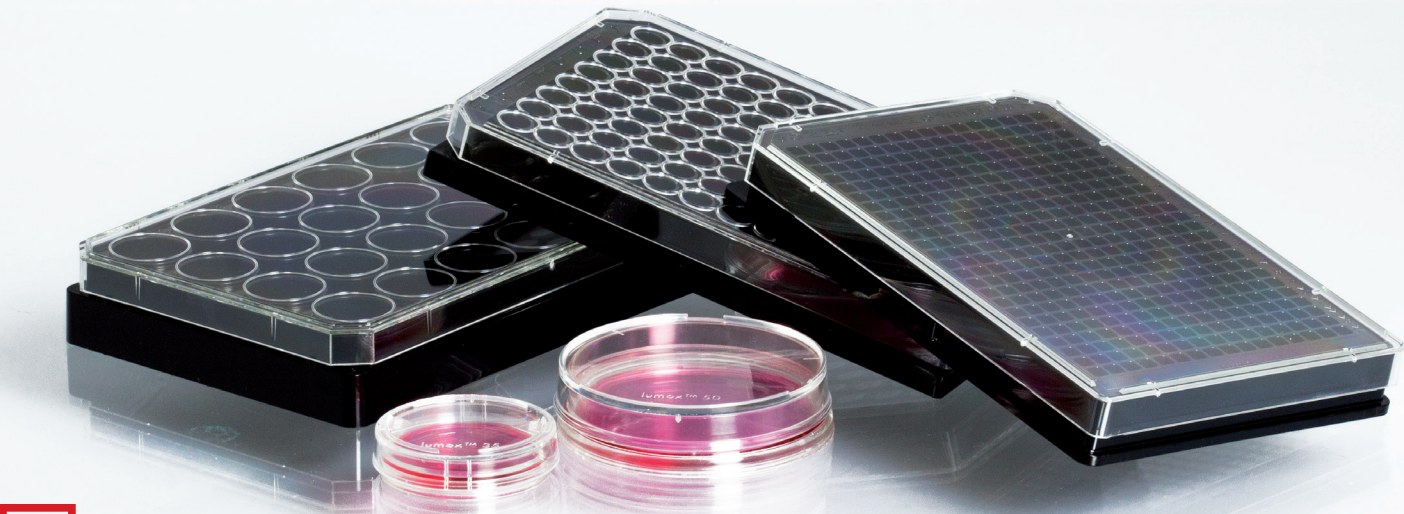

x-well 细胞培养小室

使用 x-well 细胞培养小室，可以在载玻片上直接培养和分析细胞。载玻片与聚苯乙烯盖共同组成单室或多室容器。无论您是对活细胞还是固定细胞，进行荧光或光学显微分析、单个检查或平行检测，x-well 细胞培养系列产品都能为您提供理想的解决方案。该系列所有产品均经过严格检测认证，无菌、无热原/无内毒素、无细胞毒性。

- 快速进行组织染色和荧光染色
- 采用小室设计，节约实验成本
- 载玻片光学性能极佳
- 适合贴壁细胞培养
- 高耐化学性

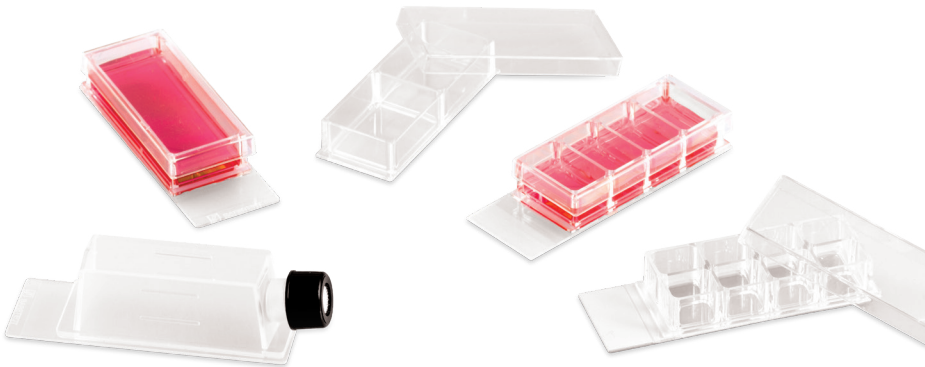

x-well PCA 细胞培养小室 • 可分离

x-well PCA 细胞培养小室载玻片由聚烯烃制造，相对于聚苯乙烯，聚烯烃材质自发荧光更低，且耐化学腐蚀性更强。

- 载玻片标准尺寸大小，带书写区
- 自发荧光低
- 无需借助工具，即可手工将小室与载玻片分离
- 最优放大倍数可达 400 倍（40x 镜头）

x-well 盖玻片细胞培养小室

x-well 盖玻片细胞培养小室，底部厚度仅 170 µm，特别适合高分辨率和共聚焦显微镜观察。

- 自发荧光极低
- 短型载玻片，无书写区
- 载玻片不可分离
- 最优放大率可达 1,000 倍（100x 镜头）

x-well 玻璃底细胞培养小室 • 可分离

标准尺寸载玻片，理想的细胞生长条件，突出的光学特性。耐化学腐蚀性高，可应用于多数固色剂和染料染色。

- 载玻片标准尺寸大小，带书写区
- 自发荧光极低
- 无需借助工具，即可手工将小室与载玻片分离
- 最优放大倍数可达 400 倍（40x 镜头）

x-well lumox® 细胞培养小室 • 可分离

x-well lumox® 细胞培养小室生长面由透气的 lumox® 薄膜组成。lumox® 薄膜底部具有优异的光学性能，特别适用于基于荧光方法的细胞生物学分析。

- 载玻片搭载极薄的 lumox® 薄膜 (50 µm)，标准尺寸，带书写区
- 自发荧光极低，且透明度超高
- 无需借助工具，即可手工将小室与载玻片分离
- 最优放大倍数可达 400 倍（40x 镜头）

订购信息 – x-well 细胞培养系列耗材

孔数	PCA 材质	lumox®	玻璃底	盖玻片	生长面积 [cm²]	单孔工作体积 [ml]	包装规格 个每包/个每箱
1 孔	94.6140.102	94.6150.101	94.6170.102	94.6190.102	9	4	6/96
2 孔	94.6140.202	94.6150.201	94.6170.202	94.6190.202	4.4	2	6/96
4 孔	94.6140.402	94.6150.401	94.6170.402	94.6190.402	1.9	1	6/96
8 孔	94.6140.802	94.6150.801	94.6170.802	94.6190.802	0.8	0.5	6/96
培养瓶	94.6140.002	-	94.6170.002	94.6190.002	9	4	6/96

flexiPERM® – 可重复使用的细胞培养小室

flexiPERM® 是一种可重复使用的硅胶培养小室，可将细胞培养皿和载玻片分割成较小的培养单元。flexiPERM® 的高贴附性底面可稳妥贴附在任意平面上，如玻璃、塑料或 lumox® 薄膜等。

- flexiPERM® 贴附性强，是可重复使用的硅胶细胞培养室
- flexiPERM® 不溶解于水，无毒性
- flexiPERM® 耐热（高达 125°C）、耐寒（低至 -20°C），且几乎耐受所有实验室化学试剂
- 可通过高压灭菌或 70% 乙醇灭菌
- flexiPERM® 适用于 DIN 载玻片和细胞培养皿
- flexiPERM® 可用于为期 2 周左右的长期实验

flexiPERM® 载玻片式小室和 flexiPERM® micro12 小室

flexiPERM® 载玻片式小室 ② 带有 8 个小室分区，flexiPERM® micro12 ① 带有 12 个小室分区，适用于在 DIN 载玻片上进行平行细胞检测。可与 quadriPERM® 组合使用。

flexiPERM® conA 型和 conB 型小室

flexiPERM® conA ③ 和 flexiPERM® conB ④ 两个型号分别针对动物和植物生理学领域的特殊细胞培养而研发。漏斗形小室在显微操作和显微注射领域中用途十分广泛。通过显微操作，可以进行细胞内或细胞间测量。

flexiPERM® disc

flexiPERM® disc ⑤ 分为四个隔室，非常适合与 50 mm lumox® 细胞培养皿或直径为 50 mm 的其他任意细胞培养皿一起使用。
flexiPERM® disc 可用于在一个容器中共培养不同类型的细胞。

quadriPERM® 细胞培养皿适用于平行检测

quadriPERM® 是一款矩形细胞培养皿，用途广泛，具有以下优势：


- **适用于平行分析的细胞培养皿**
quadriPERM® 具有四个大小相同的隔室，可在相同条件下平行培养细胞。可直接在 quadriPERM® 中培养悬浮细胞。培养贴壁细胞时，可将 x-well 产品、flexiPERM® 或 DIN 载玻片放入隔室中。
- **使用简单**
在 quadriPERM® 中，可轻松快速更换培养基，培养细胞。此外，quadriPERM® 培养皿的外形尺寸符合 ANSI/SLAS（原 ANSI/SBS）标准，和 SARSTEDT TC 板一样，也可利用显微镜进行观察。
- **用途广泛**
除细胞培养外，quadriPERM® 还可用于多种不同的应用。例如用于细胞遗传学研究中的染色体原位制备。此外，还可用于固定和组织学、免疫细胞化学或免疫荧光染色。quadriPERM® 甚至还可用作变性、杂交或洗膜的容器。其他应用包括：
 - 平行检测
 - 温育载玻片
 - 免疫组化
 - 免疫细胞化学
 - 荧光原位杂交 (FISH)
 - 细胞微阵列
 - 支原体检测
 - Northern、Southern、Western 印迹杂交
- **质量保证**
quadriPERM® 培养皿经严格检测认证，无菌、无热原/无内毒素、无细胞毒性。

订购信息 – flexiPERM®

订购编号	描述	图	小室数	单个小室生长面积 [cm²]	工作体积 [µl]	包装规格 个/箱
94.6011.436	flexiPERM® micro 12	1	12	0.3	100 - 200	5
94.6032.039	flexiPERM® slide	2	8	0.9	300 - 500	5
94.6077.435	flexiPERM® conB	4	1	3.1	2,000 - 3,000	5
94.6077.434	flexiPERM® conA	3	1	1.1	1,000 - 1,500	5
94.6034.067	flexiPERM® disc	5	4	1.8	500 - 1,000	5

订购信息 – quadriPERM®

订购编号	描述	单隔室培养面积 [cm²]	单隔室工作体积 [ml]	包装规格 个每包/个每箱
94.6077.307	quadriPERM®	24.9	约 10	12/48

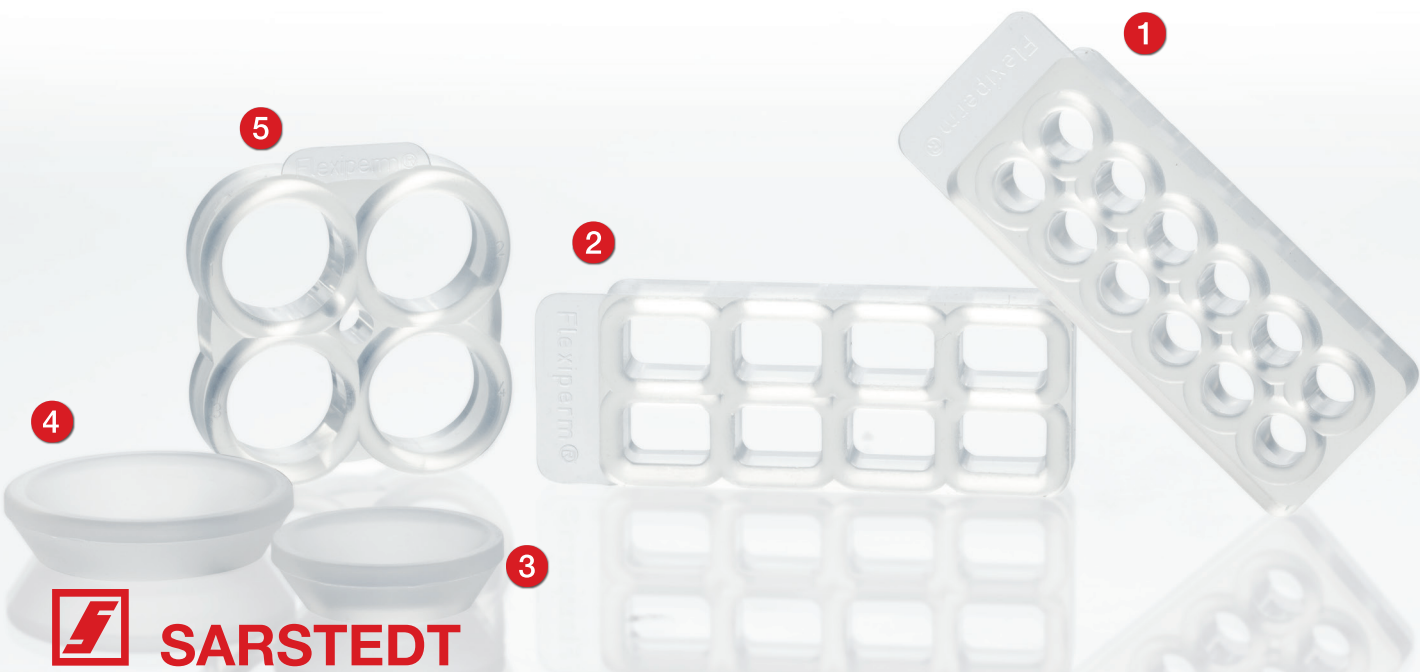

miniPERM® 是一款操作简单的生物反应器，专门用于真核细胞（哺乳动物细胞、昆虫细胞、植物细胞）高密度培养、生物量生产以及细胞制品生产研发等。该生物反应器可划分为生产模块和营养供应模块，配合转动模块，可用于在小体积内生产高浓度的细胞制品。利用这种反应器，细胞密度可以达到每毫升 10^7 个细胞，生产浓度可达到每毫升数毫克。miniPERM® 生物反应器是一种成本低廉并且节省时间的解决方案，可以替代细胞培养瓶，转瓶以及发酵系统等传统培养模式。

miniPERM® 生物反应器具有以下优势：

- 细胞密度高
- 生产浓度高
- 使用简单
- 收获量翻倍
- 有多种不同尺寸的生产模块可选

miniPERM® 生物反应器适合多种应用*：


- 培养杂交瘤细胞，以获得抗体
- 培养转染细胞，收获重组蛋白质或病毒
- 真核细胞和原核细胞的生物量产化产品

*参考文献：
Belin, V., Rousselle, P., Production of a recombinantly expressed laminin fragment by HEK293-EBNA cells cultured in suspension in a dialysis-based bioreactor, Protein Expression & Purification, 48: 43-48(2006)
Konstantinov, S. et al., Three-Dimensional Bioreactor Cultures: A Useful Dynamic Model for the Study of Cellular Interactions, Ann.N. Y. Acad.Sci.1030 : 103-115(2004)
我们非常愿意根据需求为您提供更多文献和用户报告！



原理

miniPERM® 生物反应器中的透析膜将反应器分为生产模块和供应模块（双分区系统）。透析膜的渗透参数为 12.5 kDa，因此，细胞和细胞分泌物 (> 12.5 kDa) 都不会渗透到供应模块中。与此同时，营养成分和细胞代谢物可以通过透析膜进行交换。气体交换则通过生产模块朝外一侧上的薄质透气硅胶膜进行。

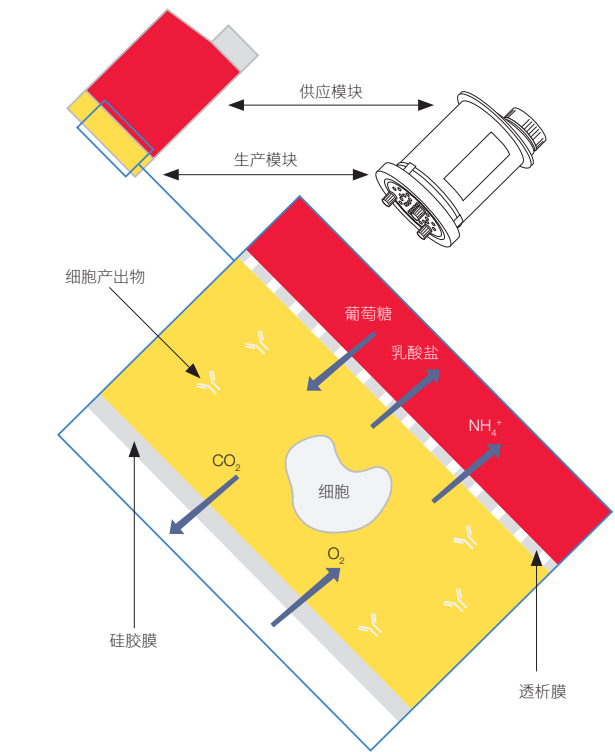


miniPERM® 生产模块

- miniPERM® 生产模块适用于培养悬浮细胞。根据生产规模，有两种不同的培养体积可用：
- miniPERM® 标准款提供 35 ml 细胞培养体积，是研究型实验室理想首选。
 - miniPERM® HDC50 提供 50 ml 的培养体积，适用于较大通量的蛋白质和生物质生产。



通用旋转装置

为了在 miniPERM® 生物反应器中达到最佳的营养供应和废物处理，需要通过连续旋转使细胞保持悬浮状态。培养期间，miniPERM® 生物反应器围绕纵轴旋转，整个装置放置于 CO₂ 培养箱中，培养环境相对湿度 70% 以上。通用旋转装置最多可容纳四个 miniPERM® 生物反应器。

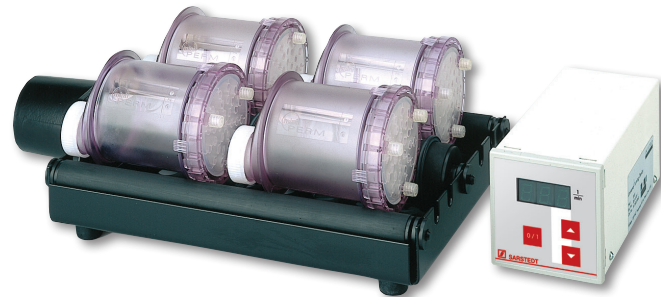

生物反应器和配件

miniPERM® 生物反应器

- miniPERM® 无菌型：生产模块和供应模块相互连接，无菌、无热原/无内毒素、无细胞毒性，一次性使用。
- miniPERM® 可重复使用型：供应模块可高压灭菌，重复使用。生产模块为一次性消耗品，无菌、无热原/无内毒素、无细胞毒性，独立包装。

miniPERM® 配件

为了便于操作 miniPERM® 生物反应器，我们还提供以下配件：

- 无菌一次性注射器 (2 ml, 50 ml)
- miniPERM® 支架
- 两个模块的无菌螺旋盖
- 无菌小管 (25G x 5/8")
- 无菌注入管

miniPERM® 启动套装

此套装包括起始培养、取样和收获所需的所有配件。

订购信息 – miniPERM®

订购编号	描述		包装规格 个/箱
94.6001.059	miniPERM® 标准款	生物反应器，无菌	2
94.6001.055	miniPERM® 标准款	生产模块，无菌	4
94.6077.121	miniPERM® HDC 50	生物反应器，无菌	2
94.6077.017	miniPERM® HDC 50	生产模块，无菌	4

订购信息 – 配件

订购编号	描述		包装规格 个/箱
94.6001.153	用于 miniPERM® 的供应模块，可高温高压消毒		4
94.6001.054	用于 miniPERM® 的支架		4
94.6001.036	用于生产模块的螺旋盖，无菌		6
94.6077.037	用于供应模块的螺旋盖，无菌		16
94.6077.135	Luer 小管，25G x 5/8"，无菌		100
94.6077.136	一次性吸头，2 ml Luer，无菌		100
94.6077.137	一次性吸头，50 ml Luer Lock，无菌		60
94.6077.138	注液管 5"，Luer，无菌		50
94.6001.094	启动支持套装	件数	1
• 一次性吸头，50 ml Luer Lock，无菌		8	
• 一次性吸头，2 ml Luer，无菌		20	
• 注液管 5"，Luer，无菌		8	
• Luer 小管，25G x 5/8"，无菌		20	
• 间隔盖，无菌		6	
• miniPERM® 支架		1	

订购信息 – 通用旋转装置

订购编号	描述	包装规格 个/箱
94.6001.061	通用旋转装置 115/230 V	1

SARSTEDT CryoPure 冻存管已经过严格细胞材料测试并获得相关认证（参见第 4 页）：

- 无菌
- 无热原/内毒素
- 无细胞毒性
- 无致变物
- IVD CE

如需超低温（-196℃）储存细胞或其组分，SARSTEDT 为您提供多种专业的冷冻产品。



产品多样

- 外旋盖 CryoPure 冻存管，多种体积规格可选（1.2 ml 至 5 ml），有助降低污染风险。❶
- 内旋盖+硅胶密封圈设计的 CryoPure 冻存管，体积为2 ml，同样大小储存空间可以存放更多（10 x 10 格）。❶



符合人体工程学

根据 QuickSeal 密封原理，在遵循人体工程学设计的前提下，两种盖子安全旋松和旋紧都只需转动一圈。❷



颜色编码

6 种不同颜色的盖子与 6 种不同颜色的插片，可形成 36 种颜色组合，实现视觉编码，简化样品识别流程。

最优设计

- CryoPure 冻存管内部轮廓优化，取样无残留。
- 底部可立。❸
- CryoPure 冻存管底座采用特殊设计，用户可在 CryoRack 40 和大多数常见支架中轻松单手操作。❹





外旋 CryoPure 1.2 ml 冻存管

订购编号	盖颜色	加样刻度	包装规格
72.377	白色	1.0 ml	50/袋 500/内箱 2,000/箱
72.377.002	红色	1.0 ml	
72.377.004	黄色	1.0 ml	
72.377.005	绿色	1.0 ml	
72.377.007	紫色	1.0 ml	
72.377.992	混合色	1.0 ml	



订购信息 – 用于 CryoPure 冻存管的编码片

订购编号	颜色	包装规格
65.386	白色	100/袋 · 3,000/箱
65.386.002	红色	100/袋 · 3,000/箱
65.386.004	黄色	100/袋 · 3,000/箱
65.386.005	绿色	100/袋 · 3,000/箱
65.386.006	蓝色	100/袋 · 3,000/箱
65.386.007	紫色	100/袋 · 3,000/箱
65.386.992	混合色	100/袋 · 5 种颜色 · 2,500/箱

外旋 CryoPure 2.0 ml 冻存管

72.379	白色	1.8 ml	50/袋 500/内箱 2,000/箱
72.379.002	红色	1.8 ml	
72.379.004	黄色	1.8 ml	
72.379.005	绿色	1.8 ml	
72.379.006	蓝色	1.8 ml	
72.379.007	紫色	1.8 ml	
72.379.992	混合色	1.8 ml	



CryoRack 40/冻存管架

- 4 排 x 10 孔，可放入 40 个 CryoPure 冻存管
- 采用底部锁定设计可单手操作
- 字母数字编码，便于样本分配
- 橡胶底座，具有防滑功能

订购信息 – CryoRack 40

订购编号	包装规格
93.856.040	1/袋 · 10/箱

外旋 CryoPure 5.0 ml 冻存管

72.383	白色	4.5 ml	25/袋 250/内箱 1,000/箱
72.383.002	红色	4.5 ml	
72.383.004	黄色	4.5 ml	
72.383.005	绿色	4.5 ml	
72.383.007	紫色	4.5 ml	
72.383.992	混合色	4.5 ml	





带硅胶密封圈的内置 CryoPure 2.0 ml 冻存管

72.380	白色	1.6 ml	50/袋 500/内箱 2,000/箱
72.380.002	红色	1.6 ml	
72.380.004	黄色	1.6 ml	
72.380.005	绿色	1.6 ml	
72.380.006	蓝色	1.6 ml	
72.380.007	紫色	1.6 ml	
72.380.992	混合色	1.6 ml	



用于低温储藏的冻存盒

- 优质聚碳酸酯冻存盒，适用于低至 -196℃ 的低温环境
- 为便于识别样本，在冻存盒的每个冻存管储藏位上，都标有数字编码
- 顶盖水晶般透明，大开口的彩色底部设计有助快速散热
- 冻存盒规格多样，适用于常见的 1.2/2.0 和 5.0 ml CryoPure 冻存管
- 尺寸包含 5x5、9x9、10x10 等
- 可高压灭菌（121℃，20 分钟）

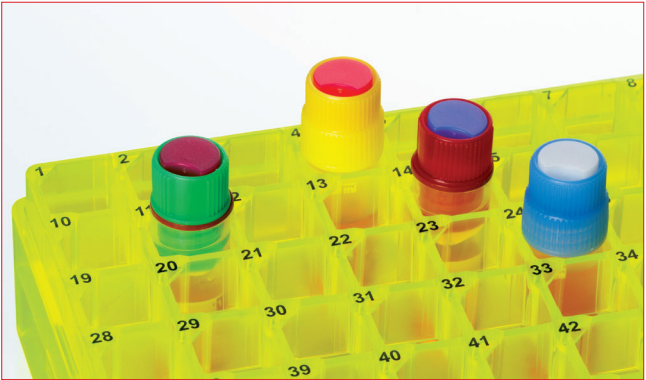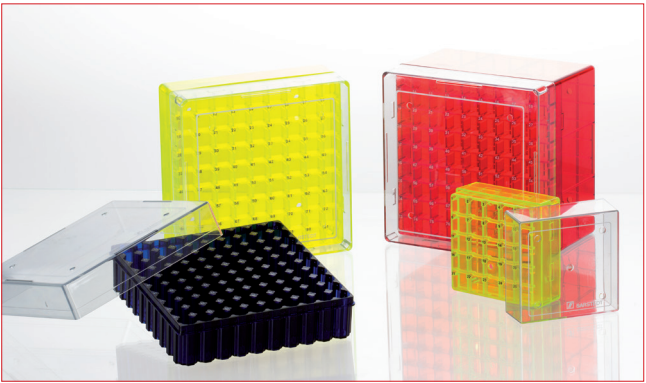

尺寸信息

适用于冻存管	1.2 - 2.0 ml	1.2 - 2.0 ml	1.2 - 2.0 ml	3.5 - 5.0 ml
网格数量	5 x 5	9 x 9	10 x 10	9 x 9
储藏容量	25	81	100	81
盒子尺寸（宽x高x深），单位：mm	75 x 75 x 52	132 x 132 x 53	132 x 132 x 53	132 x 132 x 95
	内旋和外旋冻存管		内旋冻存管	内旋和外旋冻存管
兼容性				

订购信息 – 冻存盒

包装规格	颜色	订购编号			
5/袋 20/箱		93.872.225	93.873.281	93.874.210	93.875.281
5/袋 20/箱		93.872.425	93.873.481	93.874.410	93.875.481
5/袋 20/箱		93.872.625	93.873.681	93.874.610	93.875.681

SARSTEDT 细胞筛设计创新，使用方便，可用于快速制备单细胞悬液（用于原代细胞培养，流式细胞检测等）。该产品采用优质尼龙筛，有 40、70 和 100 μm 三种孔径可选。

SARSTEDT 细胞筛产品特点

以下产品特性有助于简化操作流程并降低污染风险：

- 彩色标记 – 40μm（蓝色），70μm（白色）和 100μm（黄色），能够快速识别孔径。^①
- 细胞筛采用无菌罩独立包装，环绕封闭，取用方便。小把手设计可避免操作者无意中触碰到筛体，将样品污染风险降至最低。^②
- 框架上的四个凸出连接片，确保过滤期间连续通风，能够有效防止液体溢出 – “气锁”效应。^③
- 细胞筛可多个堆叠，用于多级过滤细胞悬浮液，例如器官消化获得的原代细胞培养。^④
- 细胞筛与常用 50 ml 离心管尺寸兼容。^⑤
- 配有适配器，可与各种口径较小的管（如 15 ml、5 ml、Ø 17 x 100 mm、Ø 12 x 75 mm FACS 管）组合使用。^⑥
- 细胞筛与适配器均经过严格检测认证，无菌、无热原/无内毒素，无细胞毒性。



订购信息 – 细胞筛

订购编号	描述	孔径 [μm]	颜色代码	包装规格，个每包/个每箱
83.3945.040	细胞筛，无菌	40		1/50
83.3945.070	细胞筛，无菌	70		1/50
83.3945.100	细胞筛，无菌	100		1/50
83.3945.999	细胞筛适配器	–	–	1/25

Filtropur V • Filtropur BT 过滤产品

Filtropur 产品系列广泛适用于过滤水溶液（例如细胞培养基），有多种体积规格可以选择。滤膜孔径也不尽相同，可以根据不同的应用选择合适的孔径大小。Filtropur 产品系列款式多样、经济耐用且使用简单方便，自上市以来备受市场青睐。

Filtropur V 和 Filtropur BT 真空过滤产品

Filtropur V 和 Filtropur BT 产品专为细胞培养需求设计，配有聚醚砜 (PES) 过滤膜，是对细胞培养基和蛋白质溶液进行常温除菌的理想之选。

- Filtropur V 和 Filtropur BT 有三种孔径（0.45 µm、0.22 µm 和 0.1 µm）可选。
- 0.1 µm PES 滤膜用于有效地去除溶液中可能带有的支原体。
- 无菌收集瓶采用符合人体工程学原理的设计，安放稳固，有不同容量规格（250 ml 至 1,000 ml）可选。
- PES 滤膜在保证高通量的同时还能缩短过滤时间，且对蛋白的吸收性极低，是同类产品中的佼佼者。
- Filtropur V 和 Filtropur BT 均经过严格检测和认证，无菌、无热原/无内毒素、无细胞毒性。

真空过滤瓶*

	订购编号	描述	过滤量 [ml]	滤膜直径 [mm]	滤膜/孔径	包装规格 个每包/个每箱
	83.3940	Filtropur V 25	250	90	PES/0.45 µm	1/12
	83.3940.001	Filtropur V 25	250	90	PES/0.22 µm	1/12
	83.3941	Filtropur V 50	500	90	PES/0.45 µm	1/12
	83.3941.001	Filtropur V 50	500	90	PES/0.22 µm	1/12
	83.3941.002	Filtropur V 50	500	90	PES/0.1 µm	1/12
	83.3942	Filtropur V 100	1,000	90	PES/0.45 µm	1/12
	83.3942.001	Filtropur V 100	1,000	90	PES/0.22 µm	1/12

*每个真空过滤瓶都随附了一个无菌包装的、用于液体过滤后储存的螺旋盖。

瓶顶过滤器，外径最大为 45 mm

	订购编号	描述	过滤量 [ml]	滤膜直径 [mm]	滤膜/孔径	包装规格 个每包/个每箱
	83.3940.100	Filtropur BT 25	250	90	PES/0.45 µm	1/24
	83.3940.101	Filtropur BT 25	250	90	PES/0.22 µm	1/24
	83.3941.100	Filtropur BT 50	500	90	PES/0.45 µm	1/24
	83.3941.101	Filtropur BT 50	500	90	PES/0.22 µm	1/24
	83.3941.102	Filtropur BT 50	500	90	PES/0.1 µm	1/24
	83.3942.100	Filtropur BT 100	1,000	90	PES/0.45 µm	1/24
	83.3942.101	Filtropur BT 100	1,000	90	PES/0.22 µm	1/24

适用于 Filtropur 的收集瓶

	订购编号	描述	过滤量 [ml]	规格	包装规格 个每包/个每箱
	83.3940.005	适用于 Filtropur BT 25、	250	带有螺旋盖	1/24
	83.3941.005	BT 50 和 BT 100	500	带有螺旋盖	1/24
	83.3942.005	的收集瓶	1,000	带有螺旋盖	1/24

Filtropur S、Filtropur S plus 和 Filtropur L

Filtropur S、Filtropur S plus 和 Filtropur L

Filtropur S、Filtropur S plus 和 Filtropur L 适用于过滤水溶液，具有以下特性：

- Filtropur 滤膜，蛋白吸附性低且流速高
- 死体积小
- 无菌，不含热原/内毒素，无细胞毒性
- 采用 100% 无粘合剂的 GF 预滤器和 100% 无润湿剂的滤膜，具有生物相容性

Filtropur S 和 Filtropur S plus

Filtropur S 和 Filtropur S plus 注射器过滤器，能够可靠地从待过滤的溶液中除去微生物和颗粒。因此常用于无菌过滤细胞培养基、细胞培养添加剂和缓冲液。注射器过滤器有 0.2 µm 和 0.45 µm 两种孔径规格可选。

Filtropur L

即用型 Filtropur L 搭载醋酸纤维素 (CA) 滤膜，内置有玻璃纤维 (GF) 预滤器。Filtropur L 适合与隔膜泵组合使用，用于快速无菌过滤细胞培养基和体积高达 10 L 的水溶液。Filtropur L 过滤器兼容 Luer-Lock 或软管橄榄状接头。

订购信息 – Filtropur

	订购编号	描述	用途	滤膜直径 [mm]	滤膜/孔径	包装规格 个每包/个每箱
	83.1826	Filtropur S 0.45 注射器过滤器	超提纯/清除过滤	28	PES/0.45 µm	1/50，无菌
	83.1826.001	Filtropur S 0.2 注射器过滤器	无菌过滤	28	PES/0.2 µm	1/50，无菌
	83.1826.102	Filtropur S plus 0.2 注射器过滤器	无菌过滤/增加总过滤量	28	CA/GF / 0.2 µm	1/50，无菌
	83.1827	Filtropur L 0.2 S* : 软管橄榄状接头	无菌过滤	64	CA/GF / 0.2 µm	1/50，无菌
	83.1827.001	Filtropur L 0.2 LS* : Luer-Lock	无菌过滤	64	CA/GF / 0.2 µm	1/50，无菌

*用于加压过滤

订购信息 – 配件


订购编号	描述	包装规格
83.1850	膜式泵，配有软管套件、不锈钢沉降片和软管接头，适用于 Filtropur L	1/箱



血清移液管

- 由透明聚苯乙烯制成
- 带有负刻度，移液体积更大
- 带有相对刻度，灵活量取液体
- 管嘴设计优化，与绝大多数电动移液器兼容
- 25 ml 移液管管嘴导向条，帮助使用者快速地将移液管放入电动移液器
- 每个内包装上均有国际通用颜色代码，便于快速识别移液管容积
- 包装易于打开，且抗静电
- 提供独立无菌*包装或袋装产品

* 独立包装移液管均经检测和认证，无菌、无热原/无内毒素、无细胞毒性。

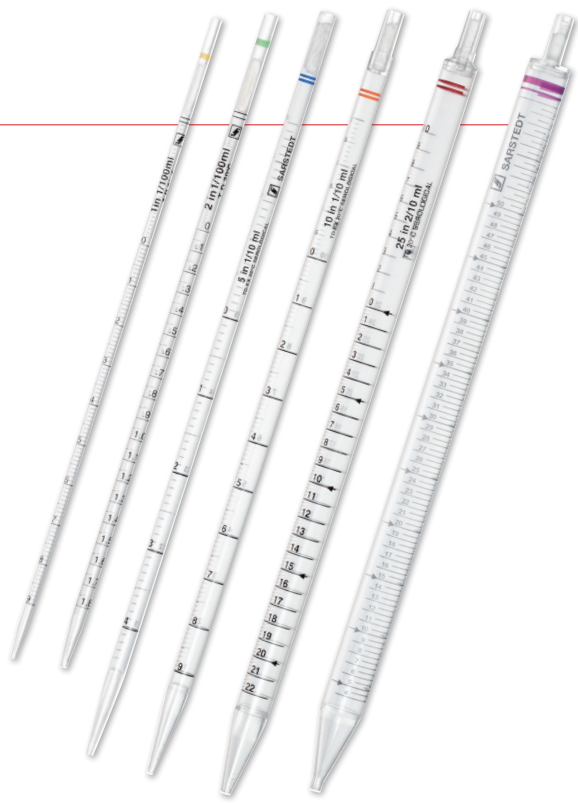

订购信息 – 1 ml、2 ml、5 ml、10 ml、25 ml、50 ml 血清移液管

订购编号	总容积/刻度		规格	颜色代码	包装规格 个每包/个每箱
86.1251.001	1 ml	1/100 ml	棉质滤芯，独立包装，无菌		100/1,000
86.1251.025	1 ml	1/100 ml	棉质滤芯，无菌，25 个/包		25/1,000
86.1252.001	2 ml	1/100 ml	棉质滤芯，独立包装，无菌		100/1,000
86.1252.025	2 ml	1/100 ml	棉质滤芯，无菌，25 个/包		25/1,000
86.1253.001	5 ml	1/10 ml	棉质滤芯，独立包装，无菌		50/500
86.1253.025	5 ml	1/10 ml	棉质滤芯，无菌，25 个/包		25/500
86.1254.001	10 ml	1/10 ml	棉质滤芯，独立包装，无菌		50/500
86.1254.025	10 ml	1/10 ml	棉质滤芯，无菌，25 个/包		25/500
86.1685.001	25 ml	2/10 ml	棉质滤芯，独立包装，无菌		25/200
86.1685.020	25 ml	2/10 ml	棉质滤芯，无菌，20 个/包		20/200
86.1256.001	50 ml	1/2 ml	棉质滤芯，独立包装，无菌		30/90

移液管

- 借助真空泵移取液体
- 纸/塑料独立包装，无菌
- 无热原/无内毒素、无细胞毒性
- 无刻度，无滤芯

移液管订购信息

订购编号	总容积/刻度	规格	包装规格 个每包/个每箱
86.1252.011	2ml/无刻度	无棉质滤芯，无刻度，无菌独立包装	1/1,000

Automatic-Sarpette®

SARSTEDT Automatic-Sarpette® 采用人体工学设计，操作时便捷轻松，即使移液工作量较大时也能让您从容应对。

- 人体工学设计，理想的重量分布
- 单手便捷操作
- 泵吸速度 3 级可调
- 配有两个移液按钮，可精确、灵敏地控制填充和移出速度
- 配有多层硅胶移液管支架，可稳当放置所有塑料和玻璃移液管
- 在最大电机功率下，填充 50 ml 的移液管仅需不到 10 秒
- 泵的电机噪音小，操作时安静舒心
- 配有镍氢电池，运行时间可达 8 小时
- 采用 LED 显示屏，用于检查电池电量



订购信息 – Automatic-Sarpette®

订购编号	描述	包装规格
90.189.200	Automatic-Sarpette® 含欧标充电器、工作台支架、壁挂架、2 个备用过滤器（0.45 µm 和 0.2 µm）	1 个/箱
90.189.202	Automatic-Sarpette® 含英标充电器、工作台支架、壁挂架、2 个备用过滤器（0.45 µm 和 0.2 µm）	1 个/箱
90.189.203	Automatic-Sarpette® 含美标充电器、工作台支架、壁挂架、2 个备用过滤器（0.45 µm 和 0.2 µm）	1 个/箱
90.189.204	Automatic-Sarpette® 含澳标充电器、工作台支架、壁挂架、2 个备用过滤器（0.45 µm 和 0.2 µm）	1 个/箱
90.189.205	Automatic-Sarpette® 含韩标充电器、工作台支架、壁挂架、2 个备用过滤器（0.45 µm 和 0.2 µm）	1 个/箱
90.189.220	用于 Automatic-Sarpette® 的备用过滤器，孔径：0.45 µm	5 个/袋
90.189.221	用于 Automatic-Sarpette® 的备用过滤器，孔径：0.2 µm	5 个/袋
90.189.222	用于 Automatic-Sarpette® 的硅树脂适配器	1 个/袋
90.189.223	用于 Automatic-Sarpette® 的备用电池	2 个/袋

M-Sarpette®

- M-Sarpette® 是一款手动球形移液器，操作简便，无需电源线和电池
- 符合人体工程学设计的计量杆控制吸入和流体输送；弹出按钮则用于完全清空
- 相对于自动的移液辅助工具，具有明显的重量优势
- 通过专门的阀门系统进行安全、可控移液
- 集成式疏水性过滤器，用于阻挡液体
- 与所有塑料和玻璃移液管兼容



M-Sarpette® 和配件订购信息

订购编号	描述	包装规格 个/箱
90.1427	M-Sarpette®	1
92.1417.001	用于 M-Sarpette® 的备用过滤器，0.45 µm	5
92.1417.002	备用硅胶适配器	1

尖底管，15 ml 和 50 ml，无菌

- 由高品质透明聚丙烯 (PP) 制成，便于观察管内液面高度
- 带刻度和书写区
- 刻度和书写区均耐受乙醇和甲醇
- 最大离心力 20,000 x g*（例外：62.559.001 最大离心力 8,000 x g）
- 无菌，无热原/内毒素，无细胞毒性



订购编号	容积 [ml]	长度 [mm]	直径 [mm]	类型	包装规格，个每包/个每箱
62.559.001	50	115	28	带裙边可立，红盖，已旋	25/300
62.547.004	50	114	28	红盖，已旋	25/托架/300
62.547.254	50	114	28	红盖，已旋	25/300
62.554.002	15	120	17	红盖，已旋	50/托架/500
62.554.502	15	120	17	红盖，已旋	50/500

* 液体密度为 1.06 g/ml，使用与尖底离心管匹配的离心转子，20°C 离心 30 分钟。

细胞培养管，PS 透明，无菌

经过预处理的聚苯乙烯管，带有螺旋盖，适用于：

- 少量细胞培养
- 悬浮细胞或单层细胞培养
- 螺旋盖既可以保证通风，又可以提供气密封闭环境



订购编号	容积 [ml]	长度 [mm]	直径 [mm]	类型	包装规格，个每包/个每箱
83.9923.945	15	125	16	红盖，经 TC 处理	5/1,000
83.9923.943	12	99	16	红盖，经 TC 处理	5/1,000
83.9923.929	10	97	16	红盖，尖底，经 TC 处理	5/1,000

双位密封管，无菌

通风塞/盖具有两级位置。第一级轻塞，管内通风；第二级，用力按压塞紧，形成密封管。




订购编号	容积	长度	直径	类型	包装规格，个每包/个每箱
55.526.006	PP 5 ml	75 mm	12 mm	无刻度	25/1,000
55.476.013	PS 5 ml	75 mm	12 mm	无刻度	25/1,000
62.526.028	PP 5 ml	75 mm	12 mm	有刻度	独立无菌包装 • 500/箱
62.476.028	PS 5 ml	75 mm	12 mm	有刻度	独立无菌包装 • 500/箱
62.515.006	PP 13 ml	100 mm	16 mm	有刻度	25/500
62.515.028	PP 13 ml	100 mm	16 mm	有刻度	独立无菌包装 • 500/箱

想了解更多管类产品信息，请登录 www.sarstedt.com，使用“Tube Finder”进行搜索查询。

如果您有任何疑问，
欢迎随时与我们联系！

访问我们的网站：www.sarstedt.com

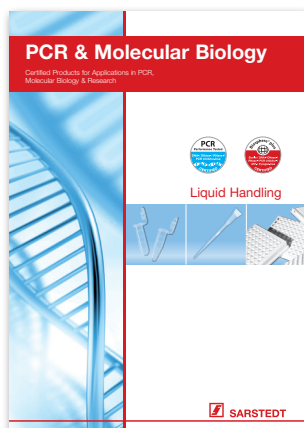

宣传册 362



宣传册 537



宣传册 471



宣传册 681



宣传册 779



宣传册 625

我们保留技术更改的全部权利

本出版物可能包含在某些国家和地区不可用产品的信息

81-215-0500-2201